


NeoShades[®] – z opaską mocującą

Okularki ochronne do fototerapii z unikalnym wzorem okularów słonecznych

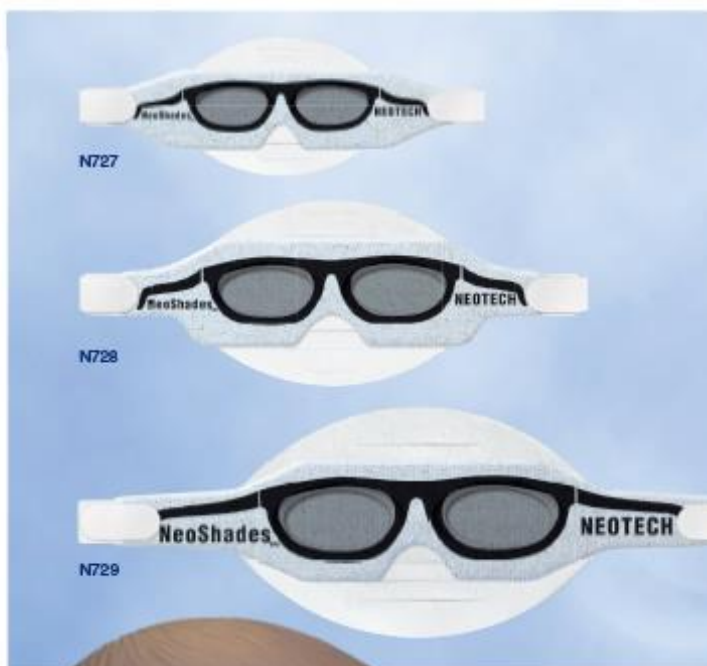

Właściwości i zalety


- Nowy, cieńszy, bardzo miękki materiał zapewnia pełen komfort oraz bezpieczeństwo
- Większe blokowanie światła UV aż do 99.999%
- Zapewnia większe bezpieczeństwo oraz redukuje czas pielęgnacji pacjenta
- Mocowanie za pomocą bezpiecznej opaski wykonanej z NeoFoam zapobiegającej zsuwaniu się

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość w
N727	Mikro / Micro	50 szt. / op.
N728	Mały / Small	50 szt. / op.
N729	Duży / Large	50 szt. / op.

Specjalny kształt zapewnia idealne dopasowanie w zależności od o różnych rozmiarów głowy



NeoShades® z opaską mocującą – wskazówki stosowania

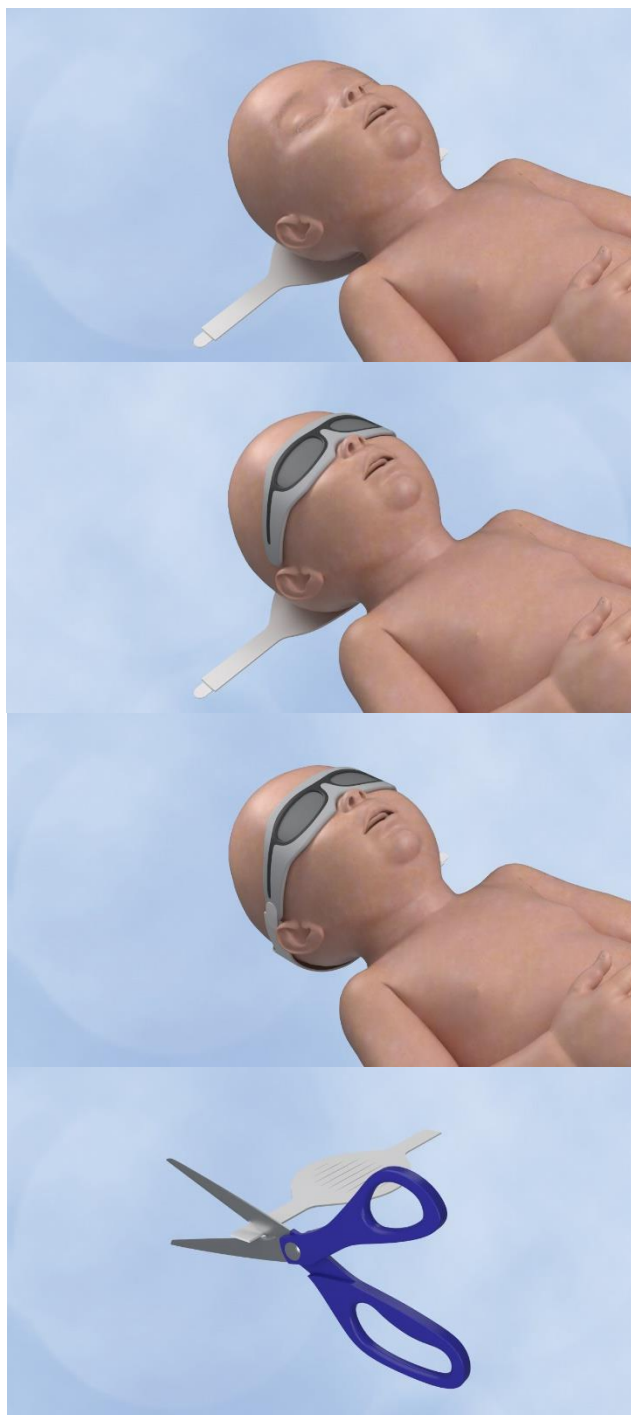

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta

Krok 1

Wybierz rozmiar odpowiedni dla pacjenta.

Krok 2

Umieść opaskę mocującą z tyłu, za głową dziecka, pianką antypoślizgową od strony włosów.

Krok 3

Ostoń oczy dziecka okularkami NeoShade.

Krok 4

Delikatnie przymocuj zapięcie rzepowe na końcu opaski mocującej do okularków NeoShades.

Krok 5

Powtórz tę czynność z drugiej strony.

Ważne: Opaski można przycinać dla lepszego dopasowania.

Uwaga: Pamiętaj, że NeoShades należy stosować pod ścisłą kontrolą wykwalifikowanego personelu medycznego.

Nr katalogowy	Długość ochronników	Obwód głowy
N727	108 mm	Poniżej 26 cm
N728	127 mm	26-34 cm
N729	178 mm	Powyżej 34 cm

Tolerancja rozmiarów obwodu główki + - 4 cm

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej Neotech: www.neotechproducts.com.

Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu bezpośrednim, jak również na pudełku do wydawania produktu

U.S. Patent #D410,021; #8,070,288;

