

# EasyFlow nCPAP

## Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji noworodków

- Bardzo delikatne i elastyczne kaniule donosowe
- Wyściełana, silikonowa, żelowa podkładka na czoło przytrzymująca aplikator
- Delikatny, nielepiący się żel silikonowy
- Elastyczna opaska na głowę jako alternatywa dla tradycyjnych czapeczek

### Nowość:

- Teraz z silikonową podkładką żelową na czoło i opaską na głowę



ParaMedica  
POLSKA

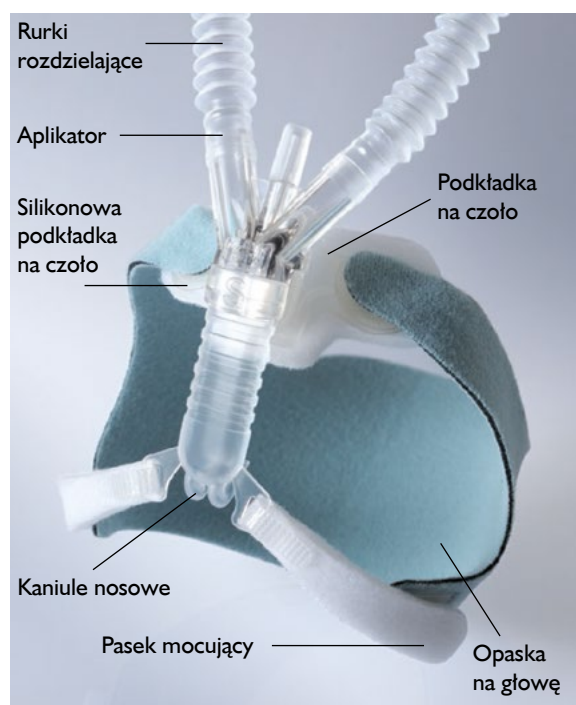


Clinical Experience  
 Technical Competence

# EasyFlow nCPAP

- Redukuje podrażnienia skóry i błony śluzowej oraz zmniejsza ryzyko powikłań
- Zapewnia idealne dopasowanie do pacjenta
- Zmniejsza nacisk i odkształcenia spowodowane ciężkimi układami oddechowymi

Nowy system EasyFlow firmy Stephan optymalnie dostosowuje się do anatomii wcześniaków i noworodków. Posiada idealnie dopasowane kaniule i maski nosowe, niezbędne do delikatnej, nieinwazyjnej wentylacji. System EasyFlow jest łatwy w obsłudze i doskonale współpracuje z respiratorami noworodkowymi m.in. SOPHIE, STEPHANIE i EVE.



To wygodne w użyciu rozwiązanie składa się z nowej opaski na głowę, silikonowej podkładki na czoło, wspornika aplikatora z metalową podkładką, aplikatora z magnesem oraz zaczepu do kaniuli lub maski. Długość i wysokość można regulować stopniowo. Opcjonalnie można podłączyć rurki rozdzielające oraz nebulizator.

Wszystkie elementy systemu są łatwe w użyciu i optymalnie dostosowują się do indywidualnej anatomii małych pacjentów.

**Różne rozmiary** – elastyczne, regulowane opaski na głowę dostępne są w trzech rozmiarach.

**EasyFlow nCPAP to perfekcyjnie dopasowany, delikatny i niezawodny system.**

Wyściełana podkładka silikonowa na czoło utrzymuje się na skórze dzięki właściwościom klejącym struktury żelowej.

Opaska na głowę, dostępna w trzech rozmiarach, umożliwia pielęgniarce kontrolę nad dopasowaniem do obwodu głowy. Opaska na głowę służy jedynie do utrzymania właściwego ułożenia kaniul lub masek nosowych za pomocą miękkich pasków mocujących. Została wykonana z miękkiej i biodegradablej tkaniny. Ponadto jest wyposażona w podkładki na rzep do przypięcia pasków mocujących.

Wysokiej jakości, bardzo miękki i elastyczny silikon zapewnia maksymalny komfort pacjenta.

**Kaniula nosowa pozwala uniknąć podrażnienia skóry lub błony śluzowej**, a dzięki optymalnemu, anatomicznemu kształtowi **nie opiera się na przegrodzie i jej nie obciąża**.

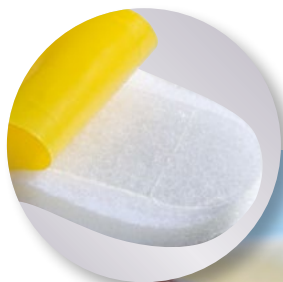
Dzięki specjalnej odchylanej konstrukcji **maska zapewnia optymalne dopasowanie** i jest samouszczelniająca.

Wyściełana silikonowa, żelowa podkładka na czoło przytrzymuje aplikator, do którego podłącza się rurki oraz kaniule lub maskę. Wbudowany magnes umożliwia **precyzyjne umieszczenie aplikatora na wsporniku** z dokładnością co do milimetra, zapewniając **optymalny nacisk i rozłożenie obciążenia**.

Rurki rozdzielające zwiększają komfort pacjenta i poprawiają zamocowanie. W znaczącym stopniu **zmniejszają nacisk i odkształcenia** spowodowane ciężkimi rurkami do wentylacji oraz pozwalają odłączyć je od nosa pacjenta.



Szybki i niezawodny interfejs pacjenta nCPAP jest niezbędnym składnikiem udanej, nieinwazyjnej wentylacji. Nową, silikonową podkładkę żelową na czoło można przymocować do skóry pacjenta bezpośrednio po porodzie. Konieczne może być delikatne oczyszczenie z mazi płodowej. Kaniule nosowe umożliwiają odpowiednie leczenie nCPAP aż do momentu, gdy pacjent będzie mógł zostać poddany bardziej komfortowemu leczeniu w systemie intensywnej opieki medycznej dla noworodków.














Po poddaniu pacjenta rutynowej opiece będzie można stosować regulowane opaski na głowę. Opaska na głowę umożliwia właściwe ułożenie kaniuli lub maski za pomocą miękkich pasków mocujących, przyczepionych do rzepów.



Nasze sprawdzone i przetestowane czapeczki są dostępne w II rozmiarach, oznaczone różnymi kolorami. Przyjazne dla skóry materiały dobrze sprawdzają się w środowisku medycznym. **Czapeczki EasyFlow nCPAP są optymalnie dopasowane, delikatne i bezpieczne.**



## EasyFlow nCPAP – akcesoria

Czapeczki (dostarczane z podpórką na czoło i paskami mocującymi)					
Rozmiar	Kolor	Obwód głowy	Waga	Ilość	Numer seryjny
XS		20 – 22 cm	500 – 700 g	1	1 701 61 019
S		22 – 24 cm	700 – 900 g	1	1 701 61 020
M		24 – 26 cm	900 – 1,200 g	1	1 701 61 021
L		26 – 28 cm	1,200 – 1,600 g	1	1 701 61 022
XL		28 – 30 cm	1,600 – 2,400 g	1	1 701 61 023
XXL		30 – 33 cm	2,400 – 3,000 g	1	1 701 61 024
3XL		33 – 36 cm	3,000 – 4,200 g	1	1 701 61 025
4XL		36 – 39 cm	4,200 – 6,000 g	1	1 701 61 026
5XL		39 – 42 cm	6,000 – 7,300 g	1	1 701 61 027
6XL		42 – 45 cm	7,300 – 8,800 g	1	1 701 61 028
7XL		45 – 48 cm	> 8,800 g	1	1 701 61 029

Zestaw na głowę mikro, nr seryjny 1 701 61 040			
Zawiera:	Obwód głowy	Waga	
Opaska na głowę mikro	20 – 28 cm	500 – 1,350 g	
2 szt. paska mocującego, kolor biały			
Podpórka na czoło			

Zestaw na głowę mini, nr seryjny 1 701 61 041			
Zawiera:	Obwód głowy	Waga	
Opaska na głowę mini	28 – 36 cm	1,350 – 3,700 g	
2 szt. paska mocującego, kolor biały			
Podpórka na czoło			

Zestaw na głowę maxi, nr seryjny 1 701 61 042			
Zawiera:	Obwód głowy	Waga	
Opaska na głowę maxi	36 – 48 cm	3,700 – 8,400 g	
2 szt. paska mocującego, kolor biały, długi			
Podpórka na czoło			

	Ilość	Numer seryjny
Wyścielana podkładka silikonowa na czoło z żelem	5	1 701 61 018
Wyścielana podkładka na czoło	5	1 701 61 017

	Ilość	Numer seryjny
Aplikator z magnesem i zaślepką uszczelnianą ciśnieniowo	5	1 701 61 161
Zestaw rurek rozdzielających Ø 10 mm	5	1 701 63 408
Zestaw rurek rozdzielających Ø 12 mm (F&P)	5	1 701 63 409
Przedłużenie maski/kaniuli	5	1 701 61 000

Kaniule nosowe		
Rozmiar	Ilość	Numer seryjny
S	5	1 701 61 001
M	5	1 701 61 002
L	5	1 701 61 003
XL	5	1 701 61 004

Maski		
Rozmiar	Ilość	Numer seryjny
XS	5	1 701 61 005
S	5	1 701 61 012
M	5	1 701 61 013
L	5	1 701 61 014
XL	5	1 701 61 015



Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa  
tel. 22 313 09 39, faks 22 313 09 59  
e-mail: handlowy@paramedica.pl  
www.paramedica.pl

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianom technicznym bez wcześniejszego uprzedzenia. Fritz Stephan GmbH 03/2015

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli. Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

